

Surecan® Safety II

Безопасные иглы к портам для длительных инфузий


Surecan Safety II – «безопасные» иглы, поддерживающие возможность введения контрастного вещества под давлением



Эталон безопасности и комфорта для пациентов и медицинского персонала: компактный размер и уникальный дизайн обеспечивают оптимальные условия манипуляций и лечения как в стационаре, так и в амбулаторных условиях.

Очевидные преимущества иглы Surecan® Safety II

- Выдерживает высокое давление до 325 psi (22,4 бар) – использование при КТ с контрастированием
- Не искажает данных МРТ
- Практически незаметна благодаря низкому профилю
- Прозрачное основание иглы гарантирует ее хорошую визуализацию при введении и позволяет распознать инфекцию на ранней стадии

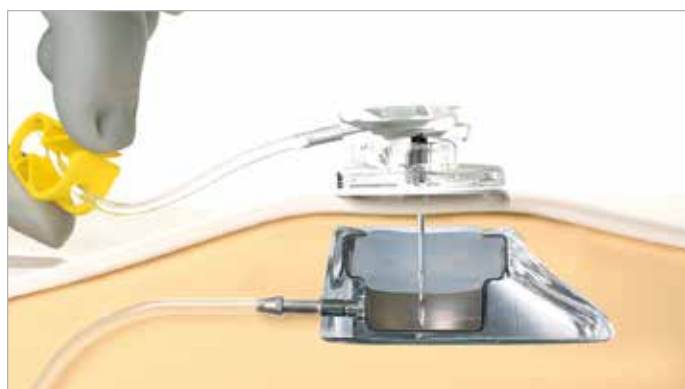



БЕЗ
ДЭГФ

БЕЗ
ЛАТЕКСА

Power
Injections



325 psi

Эргономичный дизайн крылышек:

- обеспечивает надежный захват при введении и извлечении иглы;
- размер иглы (G) указан на крыльях

Прозрачная площадка:


- визуализация места вкола иглы;
- стабилизация иглы в порте

Зажим с цветовой и буквенной кодировкой:

- мгновенная остановка инфузии при необходимости;
- легкая идентификация диаметра иглы;
- содержит информацию о максимально допустимом давлении


Удлинительная линия:

- защищена от перегибов

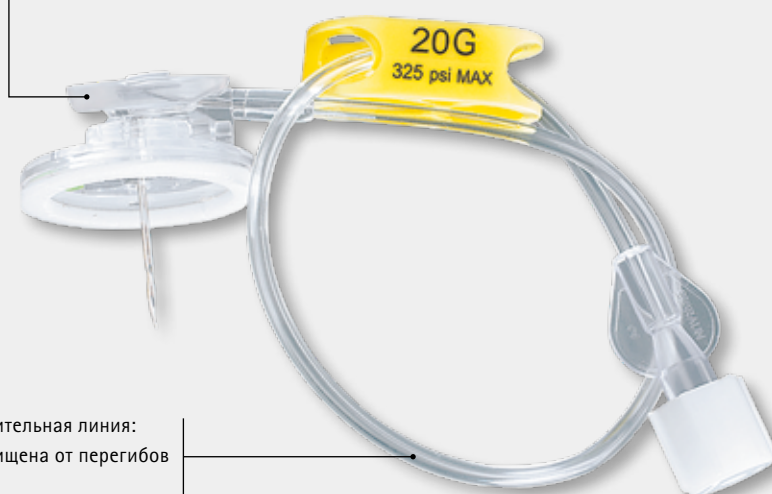

Уникальный обжим на игле:

- обеспечивает стабилизацию иглы в силиконовой мембране;
- помогает удерживать иглу в силиконовой мембране во время инъекций под давлением

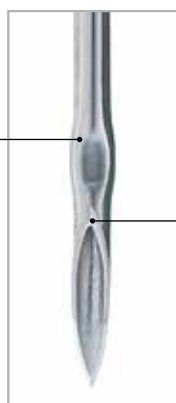

Дизайн скошенного кончика иглы

позволяет легко проникать сквозь силиконовую мембрану, не повреждая и не перфорируя ее, и облегчает восстановление структуры мембраны после извлечения иглы

Surecan® Safety II

Безопасные иглы к портам для длительных инфузий



Безопасность для персонала

Защитный механизм закрытия иглы легко контролируется визуально благодаря зеленой точке на площадке и на слух по подтверждающему щелчку



Защитный механизм предупреждает риск случайного укола иглой


Комфорт для пациента

Бортик из мягкого пористого непромокаемого материала повышает комфорт для пациента при длительном нахождении иглы в тканях


Удобство в использовании

Эргономичный дизайн крылышек способствует удобной и надежной фиксации


Для легкого извлечения иглы

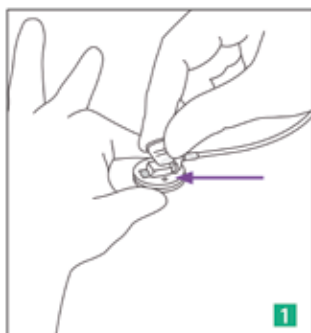

1 стабилизируйте основание иглы над портом

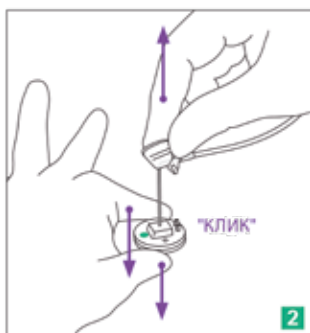

2 сильно потяните за крылышки вверх до щелчка

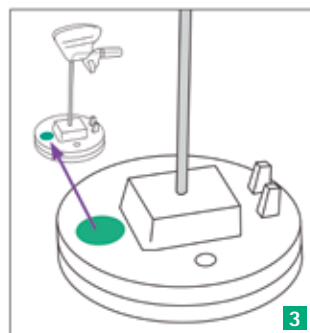

3 защитный механизм активирован!

Игла Surecan® Safety II

- Удлинитель от канюли до коннектора:
190 ± 10 мм




Игла Surecan® Safety II с Y-коннектором и с клапаном Кеасайт

- Удлинитель от Y-коннектора до коннектора – 98 мм
- Удлинитель от канюли до Y-коннектора – 105 мм
- Кеасайт – клапан с положительным смещением, препятствующий рефлюксу крови в катетер



БЕЗ ДЭГФ БЕЗ ЛАТЕКСА

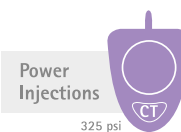

Размер	Диаметр иглы, мм	Длина иглы, мм	Шт. в уп.	Артикул
19G	1,1	12	20	4447042
19G	1,1	15	20	4447000
19G	1,1	20	20	4447001
19G	1,1	25	20	4447002
19G	1,1	32	20	4447003
19G	1,1	38	20	4447004
20G	0,9	12	20	4447043
20G	0,9	15	20	4447005
20G	0,9	20	20	4447006
20G	0,9	25	20	4447007
20G	0,9	32	20	4447008
20G	0,9	38	20	4447009
22G	0,7	12	20	4447044
22G	0,7	15	20	4447010
22G	0,7	20	20	4447011
22G	0,7	25	20	4447012
22G	0,7	32	20	4447013

Размер	Диаметр иглы, мм	Длина иглы, мм	Шт. в уп.	Артикул
19G	1,1	12	20	4447057
19G	1,1	15	20	4447045
19G	1,1	20	20	4447046
19G	1,1	25	20	4447047
19G	1,1	32	20	4447048
19G	1,1	38	20	4447049
20G	0,9	12	20	4447058
20G	0,9	15	20	4447050
20G	0,9	20	20	4447051
20G	0,9	25	20	4447052
20G	0,9	32	20	4447053
22G	0,7	12	20	4447059
22G	0,7	15	20	4447054
22G	0,7	20	20	4447055
22G	0,7	25	20	4447056